



# 위고비 사용법

## 1. 펜과 새 바늘 준비하기

펜 이름과 처방된 투여량을 확인하신 후, 펜 뚜껑을 당겨 빼세요.

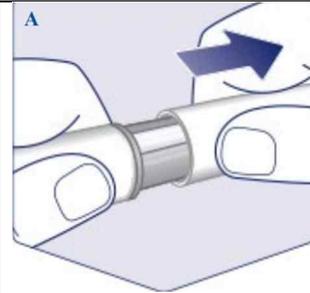


펜 내부가 투명하고 무색인지 확인하세요. 만약에 색깔이 흐리거나 변한 경우, 사용하지 마십시오.

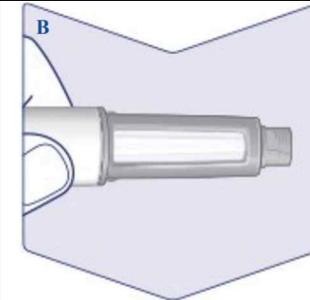



주사할 때마다 항상 새 바늘을 사용하십시오.

주사를 맞을 준비가 되면 바늘을 준비하세요. 외부 바늘 캡과 종이 탭에 손상이 없는지 확인해보세요. 만약에 손상되었다면, 멸균에 영향을 주었을 수 있으니 버리고, 새 것으로 사용하세요. 이후, 종이 탭을 떼어냅니다.

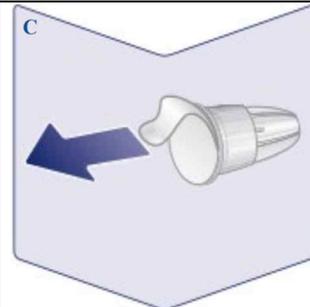

바늘을 펜에 똑바로 밀어 넣고, 짝 낄 때까지 돌립니다.

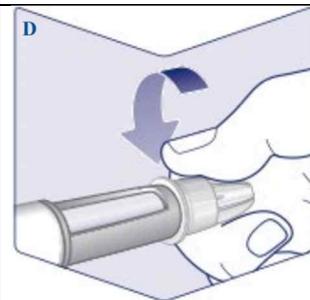

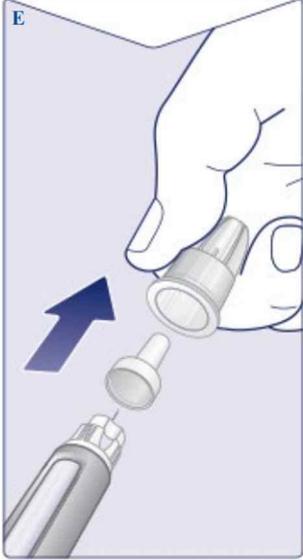
<p>바늘은 두 개의 캡으로 덮여 있습니다. 두 캡을 모두 벗겨야 합니다. 만약에 두 캡을 모두 제거하는 것을 잊어버리면, 약이 주입되지 않을 수 있습니다. <b>외부 바늘 캡을 당기고, 나중을 위해서 보관하십시오.</b> 주사바늘을 안전하게 버리기 위해서 필요합니다. <b>내부 바늘 캡을 당겨서 폐기하십시오.</b> 바늘 끝에 한 방울의 약액이 나타날 수 있습니다. 만약에 새 펜을 처음 사용하시는 것이라면, <b>'약이 잘 나오는지 확인하는 방법'</b>을 참고하세요.</p> <p>구부러지거나 손상된 바늘은 절대 사용하지 마세요. 바늘 취급에 대해서는 이 지침 아래의 <b>'바늘에 대해서'</b>를 참조하세요.</p>	
<p><b>&lt;약이 잘 나오는지 확인하는 방법&gt;</b></p>	
<p>새 펜으로 주사를 처음 주입하기 전에만 약이 잘 나오는지 확인하세요.</p> <p>만약에 이미 사용한 펜이라면 <b>"2. 투여용량 설정"</b>으로 이동하세요.</p> <p>용량 확인 기호 (☹)가 나타날 때까지 용량 다이얼을 돌립니다.</p>	
<p>용량 점검 기호 (☹)가 투여량 포인터와 일치하는지 확인하십시오.</p>	

바늘이 위를 향하도록 펜을 잡습니다.

**용량 다이얼이 0 으로 돌아올 때까지 주사 버튼을 길게 누릅니다. "0"은 용량 포인터와 일치해야 합니다.**




한 방울의 약액이 바늘 끝에 나타난다면, 펜을 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다. 만약에 방울이 나타나지 않으면, 다시 한번 확인하십시오. 그래도 방울이 나오지 않으면, **주사 바늘을 바꿔서 다시 한번 확인해 보세요. 만약에 여전히 한 방울이 나타나지 않으면 펜을 사용하지 마십시오.**

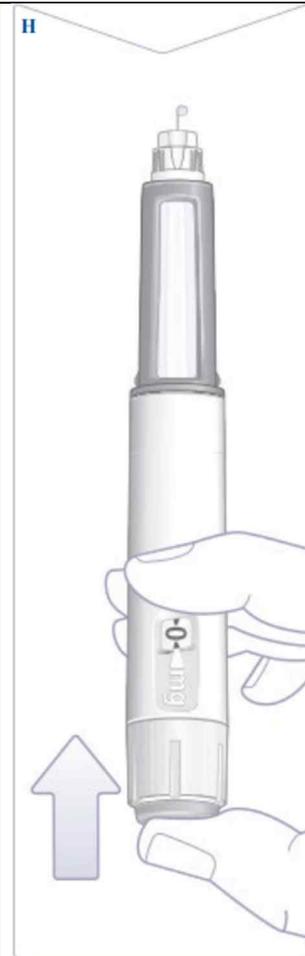

## 2. 투여용량 설정


용량 다이얼이 멈출 때까지 돌리면 처방 받은 용량이 표시됩니다.

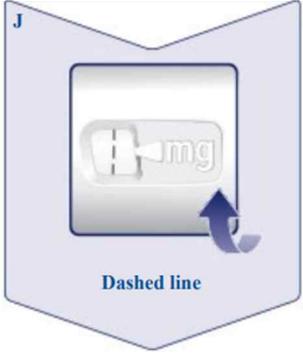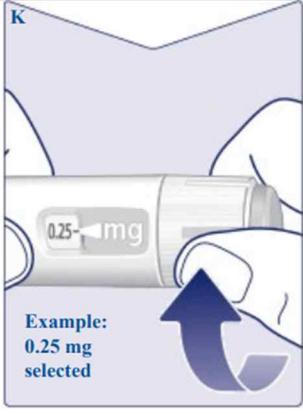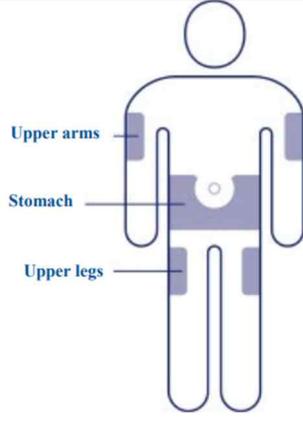


<p>용량 포인터가 가리키는 점선은 투여량을 안내합니다.  용량 다이얼을 돌릴 때마다 “딸깍” 소리가 들리고, 앞으로 돌릴 때와 뒤로 돌릴 때 다르게 딸깍됩니다. 딸깍 수를 세어서 용량을 세팅하지 마세요.</p>	
<p><b>용량 포인터와 처방된 용량이 일치하면, 잘 세팅된 것입니다.</b>  예를 들면, 위고비 0.25 를 처방받았다면 옆에 사진처럼 용량 포인터가 0.25 를 가리켜야 합니다.  만약에 용량 포인터가 처방된 용량에 도달하기 전에 멈췄다면, “약이 충분한지 확인하는 방법”을 참고하세요.</p>	
<p><b>주사 부위를 선택하세요.</b>  팔 윗부분, 배 윗부분, 다리 윗부분 중 선택 (배꼽으로부터 5cm 거리 유지). 매주 동일한 신체 부위에 주사할 수 있지만, 피부이상반응 등이 나타날 수 있으므로 지난 주사 부위와 같은 곳에 주사하지 마십시오.</p>	
<p><b>3. 주사하는 방법</b></p>	

**바늘을 피부에 찌르세요.**

**용량 포인터를 볼 수 있는지 확인하십시오.** 당신의 손가락으로 덮지 마십시오. 이로 인해 주사가 방해될 수 있습니다.

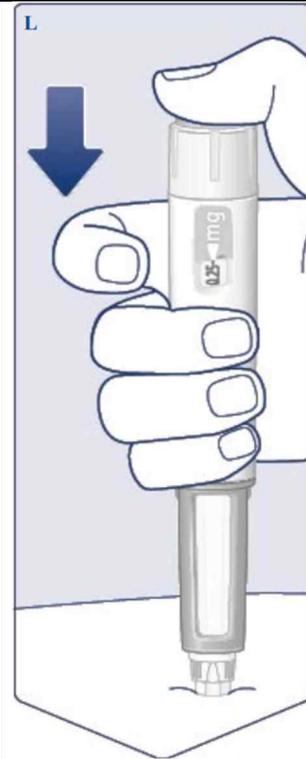


**용량 포인터가 "0"을 가리킬 때까지 주사 버튼을 누르고 계십시오.** 주사바늘을 피부에 꽂은 채로 주사 버튼을 계속 누르고, 천천히 6 까지 세십시오. 용량 포인터는 반드시 "0"을 가리켜야 하고, 용량 포인터가 "0"으로 돌아갈 때 "딸깍" 소리가 들리거나 느껴질 수 있습니다.

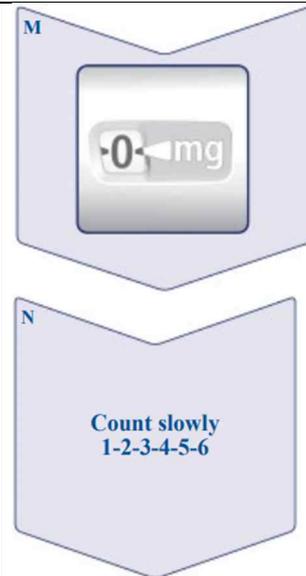

**주사침을 피부에서 빼세요.** 만약에 너무 빠르게 주사침을 피부에서 빼면, 주사침 끝에 약액이 나올 수 있고, 전체 약 용량이 주입되지 않았을 수 있습니다.


만약에 주사 부위에 피가 나온다면, 주사 부위를 가볍게 눌러 출혈을 멈추게 하십시오.

주사 후 바늘 끝 부분에 약액 한 방울이 보일 수 있고, 이는 정상이며 투여량에 영향을 미치지 않습니다.

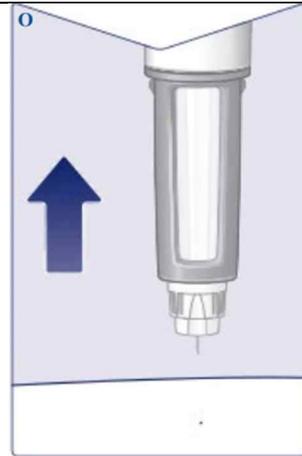

#### 4. 주사 후


바늘이나 외부 바늘 캡을 건드리지 말고, 탁자 같은 평평한 곳에서 **주사침을 외부 바늘 캡에 넣습니다.** 일단 **주사침을 외부 바늘 캡으로 덮으면,** 조심스럽게 외부 바늘 캡을 밀어서 완전히 덮도록 하십시오.

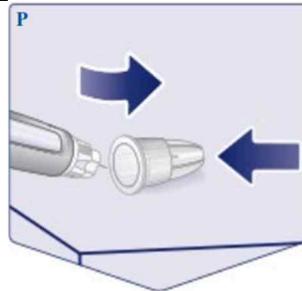


**외부 바늘 캡으로 덮은 것을 통째로 나서 풀듯이 풀고, 조심스럽게 폐기하십시오.**

바늘에 찔릴 수도 있으니, **내부 바늘 캡에 바늘을 다시 끼우지 마십시오.** 오염이나 감염을 방지하기 위해 **항상 주사 후 즉시 바늘을 폐기하십시오.**

**바늘이 부착된 상태로 펜을 보관하지 마십시오.**

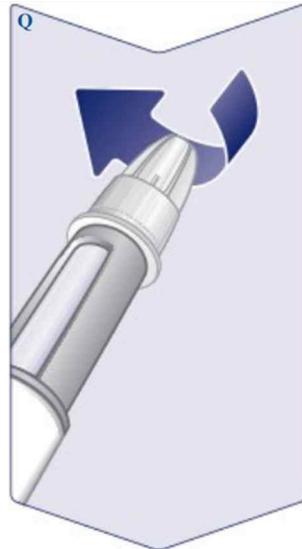

펜을 보호하기 위해 매번 사용 후 펜에 펜 캡을 씌우십시오.

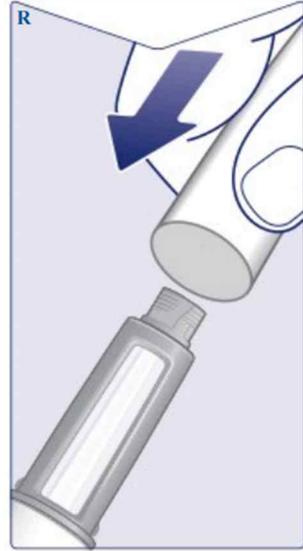

<바늘에 대해서>

주사 바늘은 의료기기입니다.

##막혔거나 손상된 바늘을 식별하는 방법

- 주사 버튼을 연속적으로 눌러도 용량 포인터가 "0"을 가리키지 않는 경우, 바늘이 막혔거나 손상되었을 수 있습니다.
- 이 경우, 귀하는 어떠한 약도 투여받지 못했습니다.

##막힌 바늘을 다루는 방법

- "1. 펜과 새 바늘 준비하기"에 따라 바늘을 교체한 후, "2. 투여용량 설정"으로 이동하세요.

<약이 충분한지 확인하는 방법>

만약에 처방된 투여량에 도달하기 전에 용량 포인터가 멈췄다면, 펜에 약을 투여하기 충분한 양이 남아 있지 않다는 것을 의미합니다. 새로운 펜을 사용하세요.

