

테로사 카트리지주

- 성분: 테리파라타이드 (뼈 형성 촉진제)
- **1일 1회** (주사기 1개는 **28일치**)
- 주사기에 테리파라타이드가 총 600mcg/2.4ml으로 함유
- 1회 주사 시 20μg 투여됨 = 1회 80μl 투여
- 최대 2년 투여
- **차광냉장보관**(사용 전, 사용 중) 5mm보다 짧은 바늘은 추천하지 않습니다.
- 주사바늘: BD Micro-Fine Ultra™ 29G~31G 바늘길이[5mm(권장), 12.7mm, 8mm]
mylife™ Clickfine 29G~31G 바늘길이[6mm, 8mm, 10mm, 12mm]
- **원케어프로그램**(T. 1833-2854, **평일** 오전9시~오후6시)
처방 받으신 날 바로 전화하셔서 안내 받으세요.

테로사 카트리리지주 키트 내용물

키트 소형가방

키트 내용물:



원케어 프로그램 팜플렛
아이스팩

- **원케어프로그램**(T. 1833-2854, 평일 오전9시~오후6시)
- 주사 투여방법 안내, 질의응답, 주사바늘과 소독 솜 안내
- 키트 내용물에는 주사바늘 7개 소독 솜 7개가 있습니다.
- 28일 투여를 위해 추가의 21개 세트가 필요합니다.
- 처음 처방 받으시면, 28일치 세트를 안내 받으실 수 있습니다.
- 두번째 처방부터는 처방 받으신 내용대로 안내 받으실 수 있습니다.

처방 받으신 날 바로 전화하셔서 안내 받으세요.

테로사 카트리지주 주사

테로사 카트리지주
테리파라타이드

피하주사용

이 약은 28회분의 약물을 포함하고 있습니다.
냉장고(2~8℃)에서 보관하며 냉동하지 않습니다.

2.4 mL x 1카트리지 | 전문의약품 | daewon 대원제약

카트리지형주사기
TERROSA® PEN
테로사 펜

사용 시 주의사항을 반드시 읽을 것

펜에 카트리지가 장착된
상태에서는 냉장보관(2~8℃) 합니다.

1 개 | 의료기기 | 등록번호 : 제1인·제4042호 | daewon 대원제약

주사 투여
준비물:

테로사펜

■ 테로사 카트리지주

■ 주사바늘

■ 소독솜

1-1. 카트리지 결합

새로운 테로사 펜 **처음** 사용 시

펜 뚜껑을 잡아당겨 벗김



카트리지 슬리브를 돌려서 열어
펜 몸체에서 분리




카트리지 금속 캡 쪽을 앞쪽으로 하여 먼저 슬리브 내로 삽입




1-2. 카트리지 결합

새로운 테로사 펜 **처음** 사용 시

이전 단계에서
펜 몸체 상황

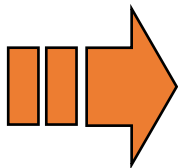

손가락으로
나사강봉을
일직선으로 끝까지
밀어넣기

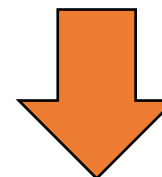

카트리지 슬리브를
90도 정도 돌려
고정하기




펜 몸체에
카트리지 슬리브 넣기



1-3. 펜 초기화 – 주사바늘 삽입


주사기 앞부분을 알코올
소독솜으로 소독하기

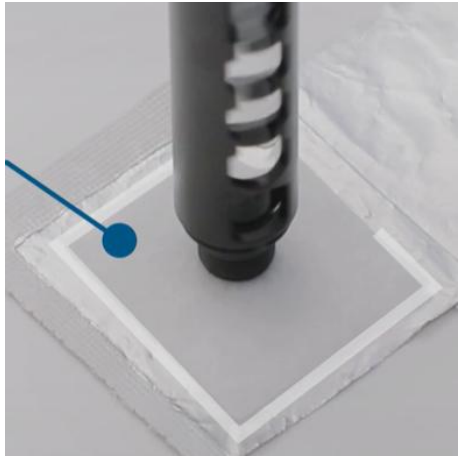

주사바늘 있는
호일의 마개 떼어내기



카트리지 슬리브에
주사바늘을 시계방향으로 돌려 끼우기

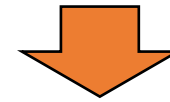


주사바늘 속뚜껑을
벗기고 폐기하기



주사바늘 겉뚜껑을
벗기고
따로 보관하기



1-4. 펜 초기화 – 약액 확인

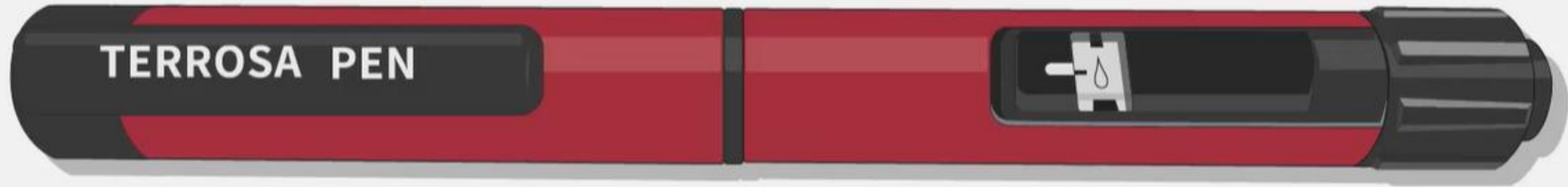

펜 초기화

새 카트리지 삽입 후 첫 번째
주사 전에 초기화 진행
매번 반복하지 않음

약이 잘 나오는지 주사하기 전에 확인하는 목적!
주사바늘을 새로 끼워서 생기는 빈 공간은 미미하므로
매번 반복하실 필요 없습니다.

주사가 잘 되는지 궁금하시다면?
다이알 표시창의 흰색화살표가 검은색 삼각형
으로 바뀌면 잘 주사된 것이니 안심하세요.

1-4. 펜 초기화 – 약액 확인

****용량설정 다이알을 용량창에
물방울 표시가 뜰 때까지
시계방향으로 조금 돌리기**



두 개의 표시선이
일직선으로
일치하는지 확인하기



이 때, 주사바늘에서
**약이 몇 방울 흘러나
와야 합니다.**
만약에 흘러나오지
않는다면, **** 순서부터
다시 하세요.**



펜 주사바늘을 위로
향하게 펜을 잡고,
**용량창이 처음상태로
(물방울→ 삼각형)
돌아갈 때까지
주사버튼을
꼭 누릅니다.**

2. 첫 투여 - 주사용량 설정


용량설정 다이알을 시계방향으로 **끝까지 돌리기**.
용량창에 흰색 화살표 표시가 뜨고 두 개의 표시선이 일직선인지 확인하기.



2-1. 주사 부위

추천받은 주사부위

주사부위에서 같은 곳을 반복 주사하지 않고, 3cm 이상 간격을 띄우고 주사하기.

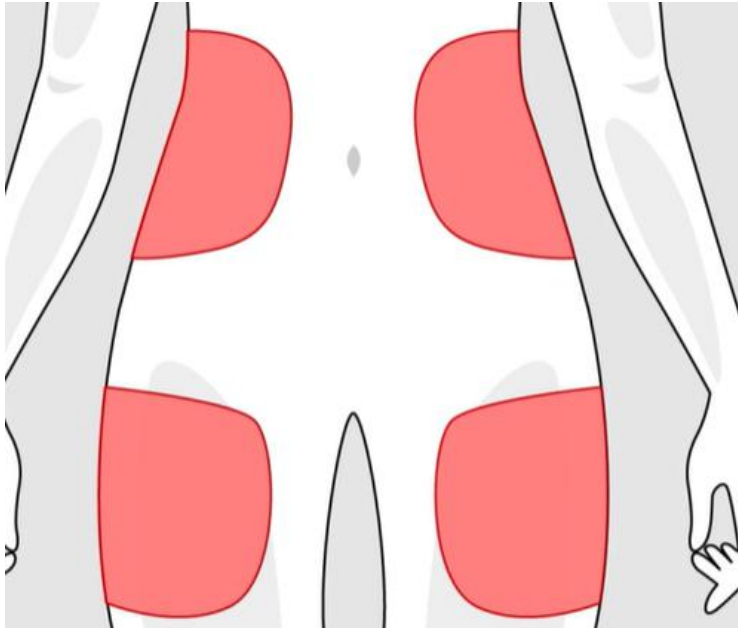


한번 주사한 부위는 최소한
2주 이내 반복하지 않습니다



2-2. 주사

주사 전, 반드시 주사할 곳을
알코올솜으로 소독하기

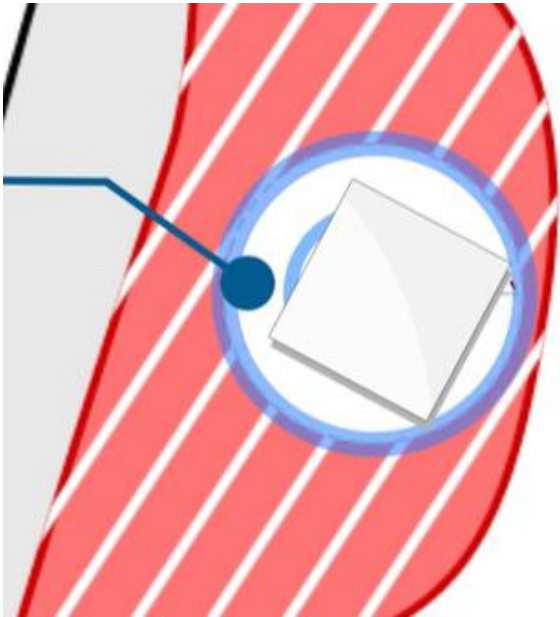

엄지, 검지 손가락으로 피부를 집어 직각으로 주사
바늘을 넣기.
피부에 주사바늘을 넣은 후에는 펜을 기울지 않기.




2-3. 주사

용량창이 처음상태(검은색 삼각형 모양)로 돌아갈 때까지 주사바늘을 꼭 누르기.



누른 상태에서 6초 유지

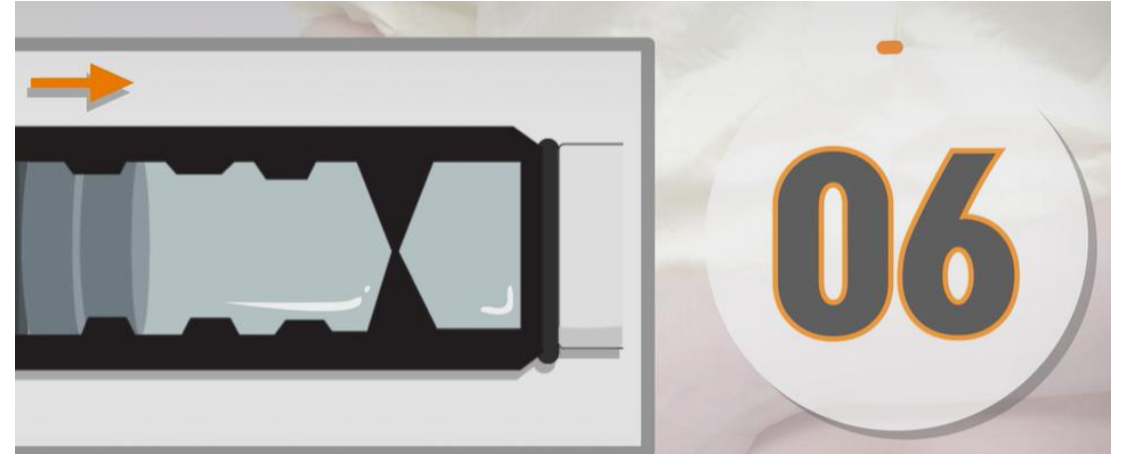

용량창이 처음상태로 돌아간 모습



펜을 천천히 수직으로 빼기



2-4. 주사 후 정리하기

주사바늘 겉뚜껑을 끼우기



뚜껑을 씌운 주사바늘을 시계
반대방향으로 돌려서 제거하기



카트리지 하나에 28번 주사할 양이 있습니다.

약을 다 사용하지 않았다면,
테로사펜에서 카트리지를 빼지 마세요.




2-5. 주사 후 정리하기

펜 뚜껑을 씌우기




얼지 않도록 냉장고에 보관하기

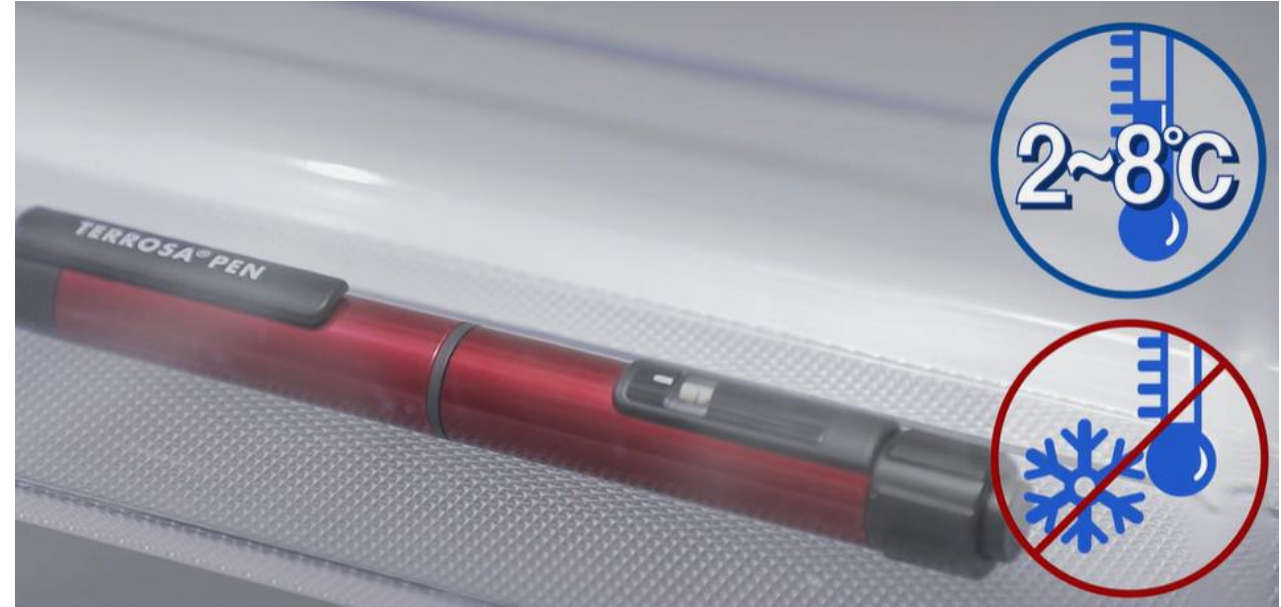


차광냉장보관!
펜뚜껑을 씌우세요.

3-1. 동일한 펜에서 2번째~28번째 주사 - 준비

펜 뚜껑을 열고,
주사기 앞부분을 알코올
소독솜으로 소독하기

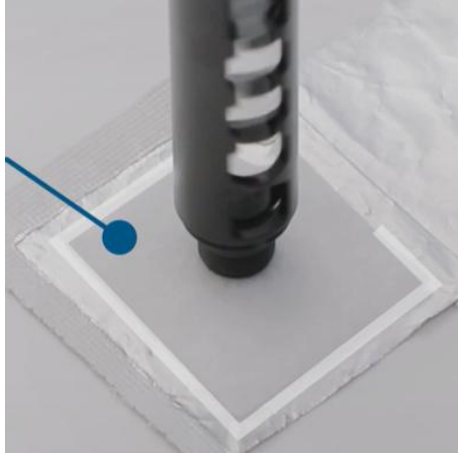

주사바늘 있는
호일의 마개 떼어내기

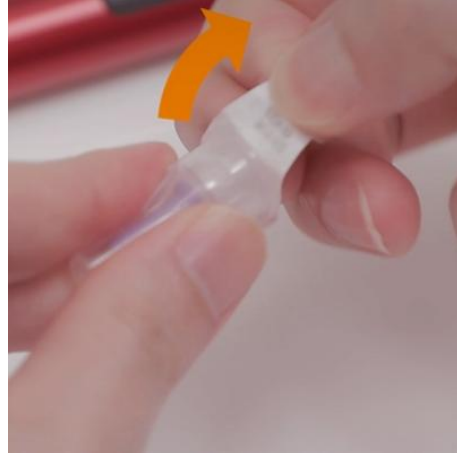

카트리지 슬리브에
주사바늘을 시계방향으로 돌려 끼우기



주사바늘 속뚜껑을
벗기고 폐기하기



주사바늘 겉뚜껑을
벗기고
따로 보관하기



3-2. 주사용량 설정


용량설정 다이알을 시계방향으로 **끝까지 돌리기**.
용량창에 흰색 화살표 표시가 뜨고 두 개의 표시선이 일직선인지 확인하기.



3-3. 주사 부위

추천받은 주사부위

주사부위에서 같은 곳을 반복 주사하지 않고, 3cm 이상 간격을 띄우고 주사하기.

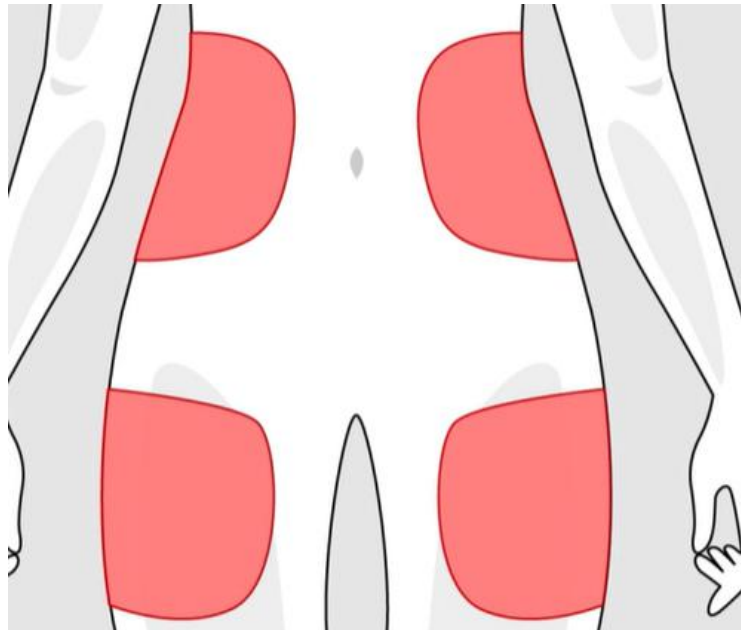


한번 주사한 부위는 최소한
2주 이내 반복하지 않습니다



3-4. 주사

주사 전, 반드시 주사할 곳을
알코올솜으로 소독하기

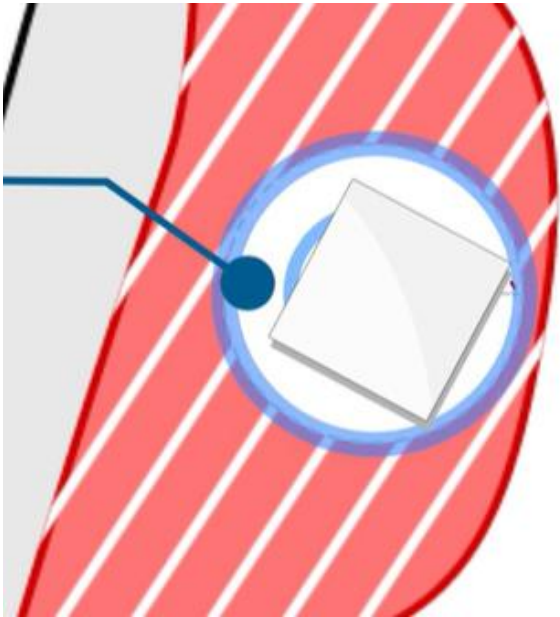

엄지, 검지 손가락으로 피부를 집어 직각으로 주사
바늘을 넣기.
피부에 주사바늘을 넣은 후에는 펜을 기울지 않기.




3-4. 주사

용량창이 처음상태(검은색 삼각형 모양)로 돌아갈 때까지 주사바늘을 꼭 누르기.



누른 상태에서 6초 유지

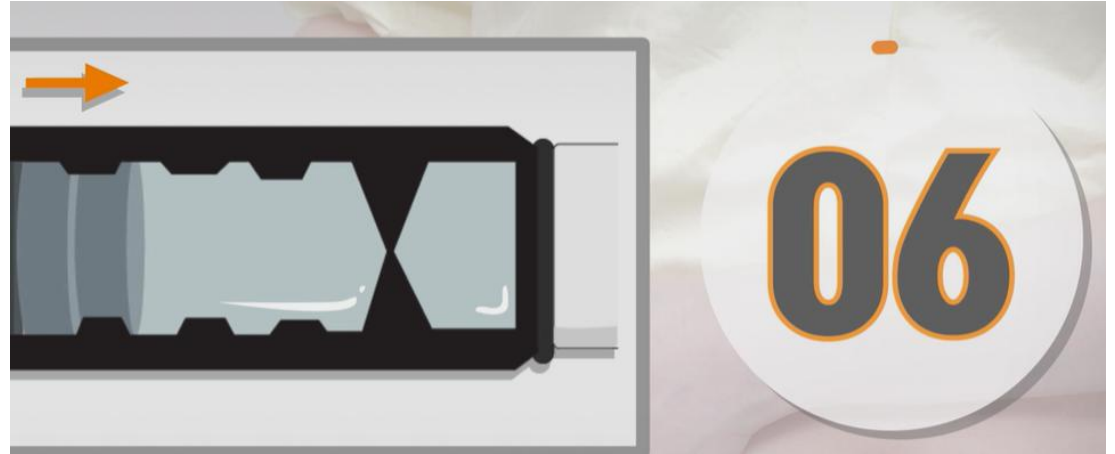

용량창이 처음상태로 돌아간 모습



펜을 천천히 수직으로 빼기



3-5. 주사 후 정리하기

주사바늘 겉뚜껑을 끼우기



뚜껑을 씌운 주사바늘을 시계
반대방향으로 돌려서 제거하기



카트리지 하나에 28번 주사할 양이 있습니다.

약을 다 사용하지 않았다면,
테로사펜에서 카트리지를 빼지 마세요.




3-6. 주사 후 정리하기

펜 뚜껑을 씌우기



얼지 않도록 냉장고에 보관하기

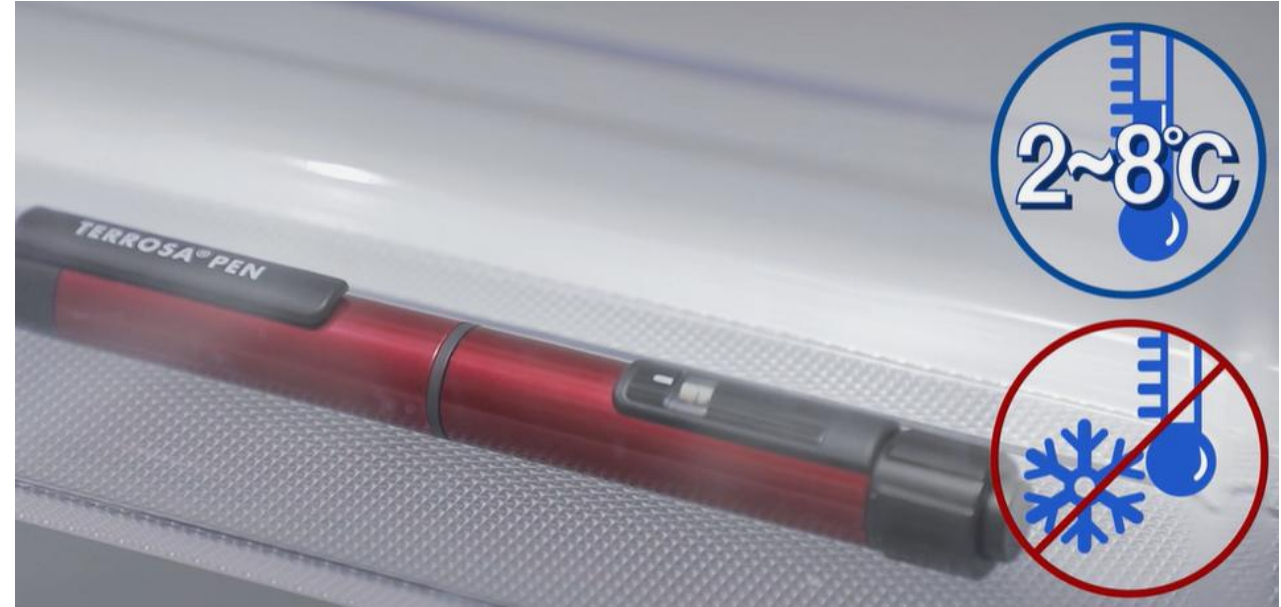


차광냉장보관!
펜뚜껑을 씌우세요.

주의사항

주사바늘을 꽂은 채
냉장보관하지 않기



한번 사용한 주사바늘을 또 사용하지 않기
(감염 예방 목적)

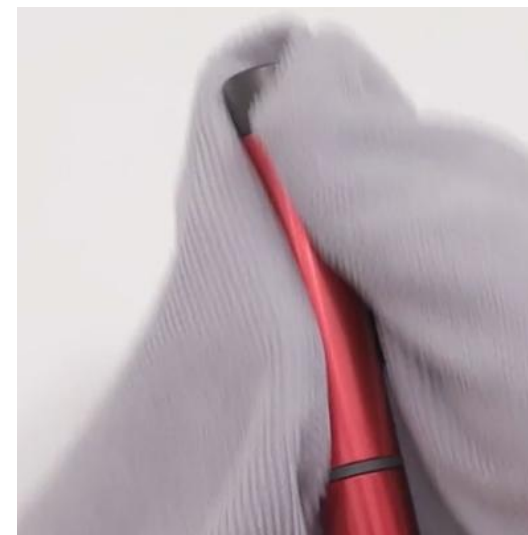

펜에 오염물이 묻었다면 젖은 천으로 닦기.
알코올이나 다른 소독제 사용하지 않기.

주의사항

<주요 부작용>

- 10% 이상 빈도의 부작용: 사지의 통증
- 1~10% 빈도의 부작용: 심계항진, 빈혈, 어지럼증, 두통, 실신, 호흡곤란, 오심, 구토, 땀 분비 증가, 우울 증 등

<과량 처치>

- 실수로 단일투여 용량으로 최대 800 μ g까지(정상투여 시 20 μ g) 투여된 케이스가 있었습니다.
- 일시적으로 메스꺼움, 무력감, 저혈압이 보고되었습니다.
- 일부에서는 과량투여로 인한 이상사례가 발현되지 않았습니다.
- 과량투여로 인한 사망은 현재까지 보고되지 않았습니다.
- 과량처치에 대한 특별한 해독제는 없습니다.
- 과량투여가 의심되면 일시적으로 투여를 중지하고, 병원에 오세요.

➤ **부작용이나 과량투여 의심 시 병원에 전화주세요: T. 054-275-0005**